

SB[®] 755



Cuando la comodidad
es lo primero



La *Invacare SB 755* combina a la perfección la comodidad, facilidad de utilización y seguridad para encajar en todos los ambientes domiciliarios y residenciales o de cuidados de larga estancia.

La **SB 755** ofrece el máximo confort con una posición sentada ideal para minimizar la fricción y el cizallamiento. Los cuidadores pueden ajustar fácilmente la cama a las necesidades de cada paciente.

Todas sus características brindan beneficios reales tanto a usuarios como cuidadores en términos de comodidad y bienestar.



Fácil utilización

El montaje y desmontaje de la **SB 755** es especialmente fácil para ayudar al máximo en su transporte y almacenaje. La cama se puede almacenar en su base y rodar directamente desde el transporte a la habitación. El montaje y el transporte se pueden llevar a cabo de forma rápida y sencilla.

El transporte y montaje lo puede realizar una sola persona de manera rápida y con el mínimo esfuerzo. Ninguna pieza de la cama pesa más de 25kg.



La seguridad es la clave

Como siempre para Invacare, la seguridad es nuestra principal preocupación. Las camas **SB 755** en todas sus versiones cumplen con la Normativa de Seguridad de camas IEC60601-2-52 sin que ello reduzca el compromiso con la ergonomía y las ventajas para el cuidador.

Nos preocupa su comodidad

La **SB 755** incluye características que aseguran una excelente posición de sentado y la reducción de la fricción y el cizallamiento durante la articulación de la cama. Estas características incluyen el sistema de auto-regresión, el largo de los planos optimizados ergonómicamente y la sección de los pies que articula por debajo del plano horizontal.


Para mayor comodidad del paciente existe una versión con ancho de somier de 120cm especialmente diseñada para pacientes bariátricos.

Características y opciones



Sistema de Auto-regresión

Comodidad y prevención para el usuario cuando articula el plano superior al minimizar la fricción y el cizallamiento.

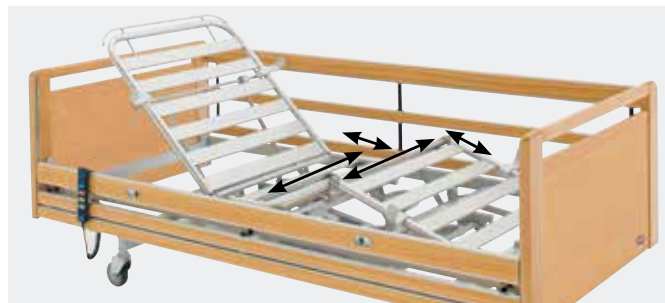

Dimensiones optimizadas

Las dimensiones de los planos del somier se ajustan a medidas antropométricas para asegurar mayor comodidad.



Somier

Somier con posibilidad de elegir, láminas de aluminio o madera.

Características y opciones



Fácil para almacenar y transportar

Las secciones de la cama y accesorios pueden ser almacenados directamente en la base, utilizando sujeciones especiales que simplifican el almacenamiento y transporte.



Paneles Victoria

Paneles centrales de extracción rápida. Con guías para barandillas Britt o Line. Disponibles en cerezo y haya.



Paneles Emma

Disponibles en cerezo y haya - para barandillas Verso II.



Paneles Sophie

Disponibles en cerezo y haya. Con guías para barandillas Britt o Line.



Versoll - barandillas de metal

Compatibles con paneles Emma



Paneles Susanne

Disponibles en cerezo y haya. Con guías para barandillas Britt o Line.



Paneles Anita

Disponibles en cerezo y haya. Con guías para barandillas Britt o Line.



Britt V - barandillas de largo completo

Disponibles en cerezo y haya.



Line - barandillas de largo completo

Aluminio con corazón de cerezo o haya.



Mando a distancia

Mando de fácil utilización.



Incorporador y portasueros

El triángulo de incorporación puede ajustarse en altura. Portasuero disponible en epoxy-gris aluminio



Asideros

Disponibles en dos medidas:
25cm alto x 30cm largo
40cm alto x 50cm largo



Freno centralizado

Activación por pedales con ruedas de 125mm.

Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web www.invacare.es

	Ancho exterior/ Ancho interior	Largo exterior/ Largo interior	Ajustes de altura	Dimensiones del somier	Altura de la base	Ángulo del respaldo	Ángulo muslos
SB 755	950/1000 mm 850/900 mm	2130 mm 2080 mm Colchón: 2000mm	350 - 820 mm Altura total: 1600 - 2070 mm	800 - 260 - 260 - 680 mm	150 mm	0 - 73°	0 - 28°
SB 755-120	1300 mm 1200 mm	2130 mm 2080 mm Colchón: 2000mm	350 - 820 mm Altura total: 1600 - 2070 mm	800 - 260 - 260 - 680 mm	150 mm	0 - 73°	0 - 28°

	Ángulo min. por debajo del plano	Ángulo de los pies	Ángulo por debajo/por encima del plano	Peso máx. usuario	Pieza más pesada
SB 755, SB 755-120	0 - 16°	0 - 18°	abajo: 25° arriba: 14°	SWL 235 kg 200 kg	25 kg



Nota/ La cama no debe ser utilizada por pacientes menores de 12 años o en pacientes corporalmente equivalentes a niños de 12 años o menos.

Cumple con el estándar de seguridad IEC 60601-2-52

Colores de la cama y madera

Gris Aluminio

Haya

Cerezo

